


水平電泳槽 Horizontal Gel Electrophoresis



水平電泳主要用來進行核酸的分離和檢測，是分子生物學研究中最常用的實驗方法。HE-135 水平凝膠電泳儀是一款性能穩定、使用簡單、再現性優異的電泳儀。應用於生化、科學研究、食品衛生、教學實驗等領域。

產品特點：

1. 外觀迷你小巧便攜帶；泳槽和電源可分離，方便使用和清潔。
2. 上蓋採用安全設計，掀蓋立即斷電確保安全；上蓋透明開孔式設計便於散熱和觀察。
3. 特別設計的電泳池形狀，減少了緩衝液左右的溫差，同時提高散熱效益。
4. 具有暫停功能、定時功能，按下啟動鍵就可離開，具有 Alarm 功能，結束時警報聲提醒。
5. 當電泳電流超過峰值電流時，將自動調整電壓以減小電流值，提高實驗再現性。
6. 主機成套配備多種規格凝膠盤/梳子，相容高通量電泳和多道移液器操作實驗需求。

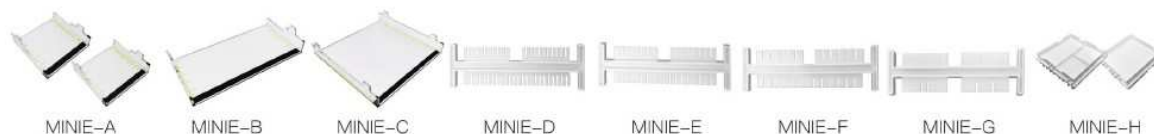

規格說明：

型號	HE-135
電泳槽容量	最大 500mL
電泳槽內徑尺寸	W150mm x D150mm x H47mm
多通道適合性	適合多通道移液器
計時功能	1min~99h59min 及連續運行，具有暫停功能
安全設置	翻起蓋子時自動暫停電源
儲存功能	自動記憶前次操作電壓和時間
輸入電壓	AC 110V， 50/60Hz
輸出電壓	恒定峰值電壓（140V），脈衝控制
可選輸出電壓	135V、100V、70V、50V、35V、25V、18V
外形尺寸	W260mm x D170mm x H68mm
淨重	0.78kg